

NEW



Misura bambini fase crescita da 5 a 17anni




- Bilancia+BIA (misura anche i bambini in fase di crescita da 7 a 18 anni).
- 4 tasti memoria persone.
- Tasto guest (ospite): per effettuare singole misurazioni senza memoria.
- Tasto solo bilancia.
- Grafico di valori standard ideali per capire se i tuoi valori sono corretti.

Semplice da usare:

- La sua praticità permette di misurare molte persone in poco tempo: inserire sesso, età e altezza e in 10 secondi appaiono i risultati sul display.
- Salire a piedi scalzi sulla bilancia prendendo in mano le maniglie.
- Tastiera luminosa per sottolineare la zona del corpo interessata.

Risultati:

- 1 Peso
- 2 Massa grassa tot. e segmentale 4 arti e tronco (kg)
- 3 Massa magra tot. E segmentale 4 arti e tronco (kg)
- 4 Liquidi tessuti (kg)
- 5 Massa ossea (kg)
- 6 Metabolismo basale (kcal)
- 7 Età metabolica
- 8 Indicazione Massa grassa viscerale

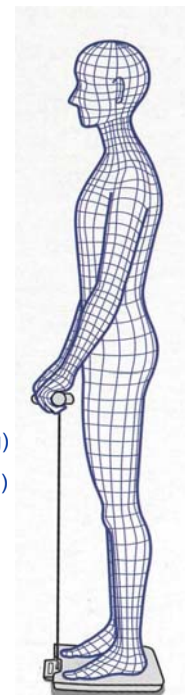

8 elettrodi tattili:

- 4 ai piedi
- 4 alle mani

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA MAX CAPACITY [MAX]	DIVISIONE DIVISION [e]	DIMENSIONI mm SIZE mm	PESO WEIGHT
BC601	000	150 kg	100g	(W)320x(L)350x(H)40	Circa/ Approx 2,5kg
Impedenza/ Impedance		BIA 50Hz (impedenza bio-elettrica) 150-900Ω			
% massa grassa/ % Fat Mass		0,1% a 75%			
Display		Grande LCD 25mm multiriga con grafico/ Large Multi line LCD 25mm with graphic			
Alimentazione/ Power		4 batterie alcaline 1,5V cod.AA/ 4 alkaline batteries 1,5V code AA			
Acc. Inclusi/ Acc. included		4 batterie alcaline 1,5V cod.AA; SD CARD/ 4 alkaline batteries 1,5V code AA; SD CARD			
Confezione/ Packaging		4 pcs; dimension (W)x/(L)x(H)mm; Circa/ Approx 12kg			



Grande visore ben leggibile multiriga con grafico valori ideali.
 Large multiline display with graph ideals



Grazie alla SD CARD si possono memorizzare e scaricare i risultati sul personal computer
 Track progress using SD CARD memory and data transfer